



Tecme

neumovent ts

Completa monitorización  
Oxigenoterapia de alto flujo  
Nuevos modos ventilatorios  
Categoría neonatal  
Ensayo de respiración  
espontánea

Respirador que brinda ventilación  
invasiva y no invasiva destinado  
a pacientes adultos y pediátricos,  
y neonatal como opcional.

**Tecme**  
committed to life

## Completa monitorización

Es posible realizar un seguimiento de los parámetros más importantes desde el inicio de la terapia, con P/V Flex, pasando por los estadios intermedios hacia el destete, con P0.1 y Pimax, entre otras pruebas y variables.

## Módulos opcionales:

### Oxigenoterapia de alto flujo

La incorporación de esta modalidad extiende el uso del respirador a las instancias previas y posteriores a la ventilación mecánica propiamente dicha brindando asistencia no invasiva a la oxigenación.

### Ensayo de respiración espontánea

Esta nueva herramienta permite realizar un ensayo de respiración espontánea previa al destete, monitoreada en tiempo real y completamente segura con alarmas dedicadas.

### Nuevos modos ventilatorios

Ventilación con control de volumen regulado por presión (PRVC), Ventilación mandatoria intermitente sincronizada con control de volumen regulado por presión SIMV (PRVC) y Ventilación con Volumen de Soporte (VSV).


### Categoría neonatal

Incorporando modalidades ventilatorias que permitirían ventilar pacientes desde los 5 ml de volumen tidal.

### AVA [Asistencia Ventilatoria Adaptativa]

El modo AVA es un modo adaptativo que garantiza una ventilación minuto óptima del paciente con el menor trabajo respiratorio.

- Ventilación para pacientes adultos y pediátricos.
- Software actualizable para:  
Ventilación neonatal.  
Oxigenoterapia de alto flujo.  
Ensayo de Respiración Espontánea (SBT) y Stress Index.  
Modos Ventilatorios PRVC, SIMV (PRVC) y VSV.
- Disponible para ventilación invasiva y no invasiva.
- Compensación automática de fugas.
- Módulo integral de mecánica respiratoria.
- Transporte intrahospitalario.
- Almacenamiento de tendencias por 72 hs.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Batería incorporada con autonomía mayor a 2,5 hs.
- Pantalla numérica.
- 2 años de garantía.

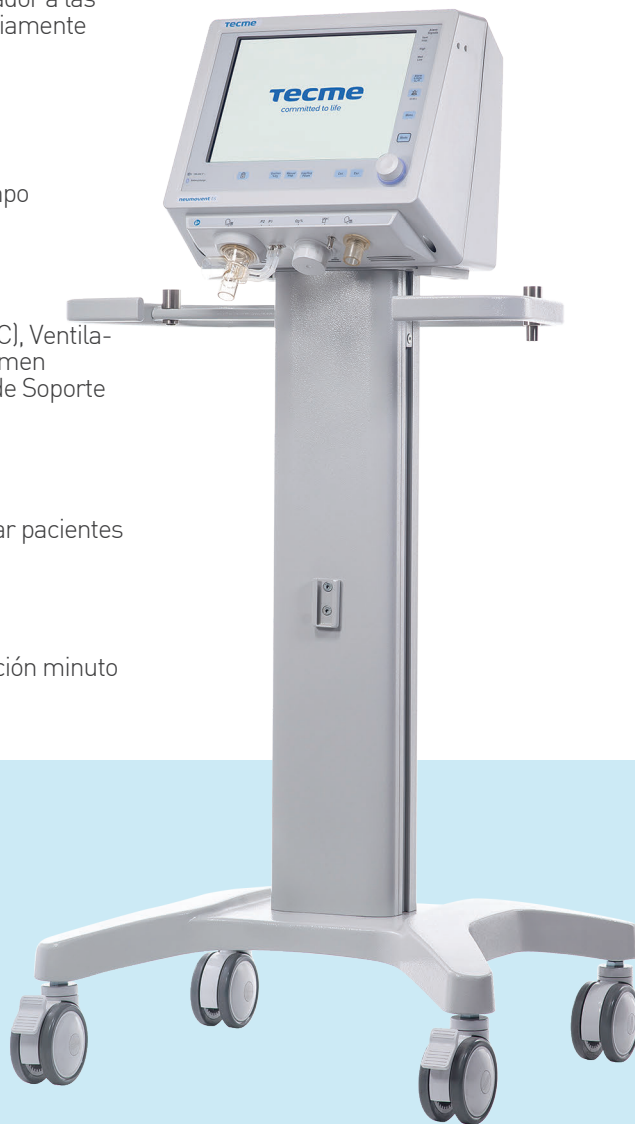

50 years of innovation and development in mechanical ventilators.

[www.tecmeglobal.com](http://www.tecmeglobal.com) / [info@tecmeglobal.com](mailto:info@tecmeglobal.com)

#### Córdoba

Av. Circunvalación (N-O) - Agustín Tosco 3040  
X5008HJY - Córdoba, Argentina

P: +54 351 4144600 - F: +54 351 4144605

#### Buenos Aires

Trole 557 - 2º Piso, Nueva Pompeya, C.A.B.A.,  
C1437DKK - Buenos Aires, Argentina

P: +54 11 1561387326

#### Atlanta

2825 Pacific Drive, Suite B  
Norcross, GA 30071 - USA

P: +1 770 409 9172 - F: +1 770 729 8176