



Video Laringoscopio

Smart Scope

Lifotronic

Intubación perfecta al primer intento

SMARTSCOPE VL PRO

AMPLIA VISUALIZACIÓN

Pantalla táctil antirreflectante de 3,5", visualización de imágenes en campo panorámico.

USB TIPO C

Para una rápida transferencia de datos y carga de batería.

BOTÓN ON/OFF


INDICADOR LUMINOSO

ROTACIÓN INTELIGENTE

Arriba-abajo → 120°
Izquierda-derecha → 270°

ASA ERGONÓMICA

Para una mejor sujeción y ajuste.

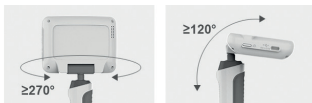

CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN

Excelente visión con antivaho activo calefaccionado.

LUZ FRÍA DE ALTA POTENCIA



Eficiencia y Claridad en la Visualización de la Laringe

Diseñado para ofrecer una visualización confiable, simple y conveniente de la laringe, facilita una visión clara de las vías respiratorias anteriores, reduciendo la necesidad de manipulación de tejidos.

La mejora en la visualización de la epiglotis ofrece múltiples beneficios:

- Menor tiempo para la intubación con éxito
- Mayor tasa de éxito en el primer intento de intubación
- Mayor tasa total de éxito de la intubación
- Reducción de la fuerza aplicada
- Reducción de las complicaciones relacionadas con la intubación
- Menor exposición de los médicos a patógenos provenientes de las gotitas



Alta compatibilidad

Cuchillas desechables en una amplia gama de tamaños, adaptándose a las diversas necesidades clínicas.



Características:



720P HD

Cámara de 2.0 megapíxeles que proporciona fotografías y videos 1280x720.



Video/Cámara

Vídeo y foto con un sólo clic.



Rotación

Ángulo de rotación arriba-abajo 120° e izquierda-derecha 270°.



Pantalla Táctil

Pantalla completamente táctil antirreflectante de 3,5 pulgadas con resolución de 640*480.



Adulto y Niño

Cuchilla desechable de 3,0~6,0 mm, 6,0~9,0 mm o más.

Potencia

- Compatible con cargadores inalámbricos y ahorro automático de batería.

Memoria inteligente

- 16Gb de memoria por defecto - Opcional: 32-256GB.

Áreas de Uso:

- Anestesia
- Pediatría
- UCI
- Ambulancia
- Urgencia/Shock Room
- Medicina Respiratoria



Especificaciones Técnicas:

El videolaringoscopio Lifotronic, combina alta tecnología en iluminación, visualización y grabación para mejorar la precisión y eficiencia en procedimientos clínicos.

Tamaño y Peso	- Dimensiones: 130 x 100 x 239 mm (L x W x H). - Peso (sin cuchilla): 0.26 kg.
Fuente de Luz	LED fría, iluminación ≥ 1000 lx, temperatura de color ≥ 5000 K.
Pantalla	- Tipo: LCD TFT a color de 3.5". - Ángulo de rotación: Frontales y traseros $\geq 120^\circ$, izquierda-derecha $\geq 270^\circ$. - Control táctil y brillo ajustable en 3 niveles.
Cámara	Tipo: CMOS, 1 millón de píxeles - Resolución espacial: ≥ 8.00 lp/mm - Ángulo de visión: $\geq 60^\circ$. Diseño anti-vaho con control de autocalentamiento (38-41°C).
Memoria	16Gb incluidos - Extensible hasta 256 GB.
Batería	Tipo: Ion de litio - Duración de trabajo: 300 minutos- Ciclo de recarga: 300 veces. Alarma de batería baja.
Cuchillas Desechables	Tamaños disponibles: S1 Neonato, S2 Pediátrico, S3 Adulto, S4 Adulto Large.
Distancia de Trabajo	20-100 mm.
Funciones Especiales	Fotografías, Grabación de video, Navegación, Reproducción, Configuración de tiempo, Registros médicos.
Puerto	USB tipo-C y carga inalámbrica.
Interfaz / Salida	Puerto de video opcional para pantalla de 10" o proyector con HDMI.
Adaptador de Corriente	AC100-240V, 50/60Hz, potencia de 50 VA.

Distribuido por:



Más de 55 años de experiencia comprometidos con la innovación y el cuidado del paciente.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo